


“Ecolab bietet eine Komplettlösung für die Aufbereitung flexibler Endoskope”



ENDOSKOP
AUFBEREITUNG

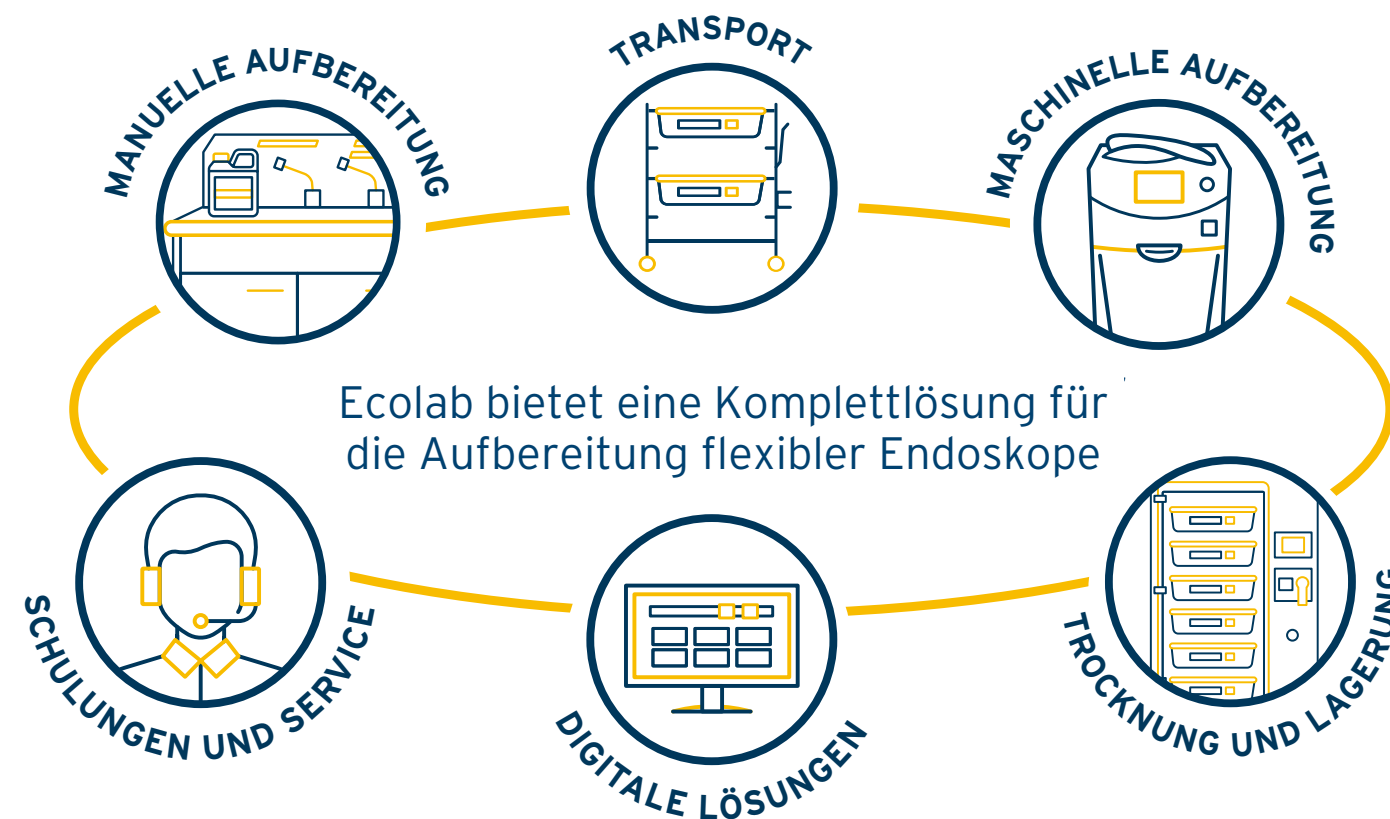

DIE ECOLAB LÖSUNG

Ecolab bietet eine Komplettlösung für die Aufbereitung flexibler Endoskope. Unsere Produkte decken jeden Schritt im Aufbereitungszyklus ab.

Jedes Produkt ist zertifiziert, einfach zu benutzen und effektiv, um die Belastung in Ihrem Alltag zu reduzieren.



PROMEDIA
MEDIZINTECHNIK

Keine vertraglichen Bilder - Soluscope behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung oder Verpflichtung zu ändern.



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Vertrieb durch:
PROMEDIA MEDIZINTECHNIK
A. Ahnfeldt GmbH
Marienhütte 15
57080 Siegen
Germany

ECOLAB
www.ecolab.com

Soluscope
www.soluscope.com

ENDOSKOP
AUFBEREITUNG



**DSC8000 - LAGERN, TROCKNEN
UND SCHUTZ FÜR IHRE ENDOSKOPE**

ECOLAB
www.ecolab.com

Soluscope
www.soluscope.com

Mikrobiologischer und physikalischer Schutz für Ihre Endoskope

CE Mark / EN 16442:2015
konform

EIN SPEZIELLER CONTAINER ZUM SCHUTZ VOR KONTAMINATION

Jedes Endoskop wird sicher in einem speziell entwickelten Container aufbewahrt. Sein Profil garantiert Luftzirkulation und eine effiziente Trocknung.

Das Container-Konzept vermeidet die direkte Handhabung der Endoskope und verringert so das Risiko von Kreuz- und Umgebungskontaminationen.



MIKROBIOLOGISCH REINE ENDOSKOPE

HEPA-14-gefilterte Luft strömt durch jeden Kanal. Die um das Endoskop zirkulierende Luft wird durch eine UV-C Lampe behandelt.



Erhöhte Produktivität

Optimieren Sie Ihre Auslastung

WORKFLOW OPTIMIERUNG

Dank der **31 Tagen Lagerzeit** ist Ihr Endoskop morgens, am Wochenende und auch in Notfällen einsatzbereit. Die DSC8000-Schnittstelle liefert Echtzeit Speicherdaten für jedes Endoskop. Sie können sofort Prioritäten für die Verwendung Ihrer Endoskope setzen und optimieren Ihren Arbeitsablauf.

DIE KOMPLETTLÖSUNG ZUR OPTIMIERUNG IHRER ABTEILUNG

Die Soluscope Transportlösung erleichtert Ihren Alltag auf sichere Weise.

Soluscope Transportcontainer wurden entwickelt, um Endoskope vom Aufbereitungsraum zum Untersuchungsraum zu transportieren. Der Soluscope Transportwagen kann bis zu 10 Endoskope auf kleinstem Raum lagern und das Soluscope EasyTag unterscheidet verschmutzte und saubere Endoskope voneinander.



GRÜNDLICHE ÜBERWACHUNG

Der DSC8000 bietet ein hohes Maß an Sicherheit, indem er alle kritischen Parameter in Echtzeit überwacht: Verbindungen zum Endoskop, Luftdruck in den Kanälen, Filterverstopfung, Ausfall der UV-C-Lampe.



ANPASSBAR AN IHRE ABTEILUNG

Der DSC8000 ist mit integriertem Kompressor oder medizinischem Luftanschluss und als Einzeltür- oder Durchreicheversion erhältlich und kann damit in den meisten Räumlichkeiten eingesetzt werden.



MINIMIERTE HANDHABUNG ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON KREUZKONTAMINATION

Spezielle Anschlüsse und individuelle Container reduzieren die Notwendigkeit der Handhabung von Endoskopen und damit das Risiko einer Kontamination.

Ein einfach zu bedienendes Gerät

Bieten Sie Ihrem Team mehr Komfort



EIN MÜHELOS ZU BEDIENENDES GERÄT

Der DSC8000 bietet den Vorteil einer intuitiven und grafischen Benutzeroberfläche für eine schnelle Einführung und einfache Bedienung. Die Container ermöglichen eine schnelle Handhabung und Verbindung mit dem Endoskop.

Die große Tür aus gehärtetem Glas ermöglicht einen einfachen Zugang und die sofortige Identifizierung der Endoskope.



KOMPLETTE ELEKTRONISCHE RÜCKVERFOLGBARKEIT UND DATENVERWALTUNG

Der DSC8000 verfügt über Barcodeleser, einen Drucker und einen lokalen Datenspeicher. Er ist mit unserer EP-Management-Software kompatibel und bietet elektronische Rückverfolgbarkeit, Echtzeit-Überwachung des Endoskop-Bestands und ermöglicht mikrobiologische Probeentnahmen und Serviceaufzeichnungen.



KONNEKTOREN

Kompatibel mit allen Soluscope-Geräten, der Anschluss ist während des gesamten Aufbereitungsprozesses mit dem Endoskop verbunden, von der Vorreinigung bis zur Lagerung. Diese Verbindung stellt sicher, dass sowohl die Konnektoren als auch das Endoskop den gleichen Hygienestandard aufweisen und bietet einen effizienten und sicheren Prozess vor der Anwendung am Patienten.