

Aniosyme Synergy WD Ultra



Ultra Reinigungskraft für Ihre Instrumente

Di-enzymatischer Reiniger für eine ultra Reinigungsleistung

Aniosyme Synergy WD Ultra ist das erste kombinierte Ultrakonzentrat-Reinigungsmittel für die automatische Instrumentenaufbereitung. Die einzigartige kombinierte Formulierung ermöglicht einen einstellbaren pH-Wert von neutral bis alkalisch. Seine di-enzymatische, silikatfreie Formulierung bietet mit seiner einzigartigen niedrigen Konzentration eine hervorragende Materialverträglichkeit.

- pH Wert von neutral bis alkalisch einstellbar
- Hervorragende Reinigungsleistung bei Dosierung ab 0,03%
- pH Wert von über 10 (bei 1%) bei jeder Wasserqualität
- Platzsparend - Wegfall von großen Gebinde



Aniosyme Synergy WD Ultra

Di-enzymatischer Reiniger für eine ultra Reinigungsleistung



Aniosyme Synergy WD Ultra
5 L Kanister



Aniosyme Synergy WD Ultra
20 L Kanister

Einzigartige Formulierung

- pH Wert von neutral bis alkalisch einstellbar
- Hervorragende Reinigungsleistung bei einer Dosierung ab 0,03%
- pH Wert von über 10 bei jeder Wasserqualität

Chemisch-Physikalische Daten

- | | | |
|--|------|-------------|
| • Dichte (Konzentrat) | 20°C | 1,158 g/mL |
| • pH Wert* (Konzentrat) | 20°C | 9,9 |
| • pH Wert* bei 0,03%
(Anwendungslösung 0,3 mL / L in VE Wasser) | 20°C | 10,1 |
| • pH Wert* bei 1%
(Anwendungslösung 10 mL / L in VE Wasser) | 20°C | 11,0 |
| • Leitwert bei 0,03%
(Anwendungslösung 0,3 mL / L in VE Wasser) | 20°C | 100,7 µS/cm |
| • Leitwert bei 1%
(Anwendungslösung 10 mL / L in VE Wasser) | 20°C | 1421 µS/cm |
| • Viskosität (Konzentrat) | 20°C | < 20 mPa/s |

*pH Wert Messungen unter Betriebsbedingungen mit Hilfe eines pH - Meters mit Temperaturkompensation.

Bestellinformationen

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Aniosyme Synergy WD Ultra	2 x 5 Liter Kanister	3104720 PZN: 168 636 48
Aniosyme Synergy WD Ultra	1 x 20 Liter Kanister	3116320 PZN: 168 636 54



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Anwendungsbereich

Konzentrierter di-enzymatischer Reiniger für die maschinelle Instrumentenaufbereitung. Reinigung von chirurgischen und medizinischen Instrumenten und Medizinprodukten in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und in Taktbandanlagen. Ultrakonzentrierte Lösung für den professionellen Gebrauch.

Gebrauchsanweisung

- Zur Anwendung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Taktbandanlagen mit einer Anwendungskonzentration zwischen 0,03% und 0,07%. Empfohlene Dosierung liegt bei 0,05%. Wenn nötig, kann die Dosierung bis auf 1% gesteigert werden
- Effektiv ab 5 Minuten
- Passen Sie die Konzentration, die Kontaktzeit und die Temperatur der Anwendungslösung entsprechend dem Verschmutzungsgrad, der verwendeten Reinigungsmethode und dem angestrebten pH-Wert im Reinigungsschritt an
- Maximale Einsatztemperatur: 60°C

Inhaltsstoffe

Tenside, Sequestrierer, Enzymkomplex (Protease, Lipase), Hilfsstoffe.

Lagerung


Gefahrgut - beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

Gutachten

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

Sichere Verwendung von Medizinprodukten

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf Etiketten und Produktdatenblatt.

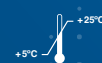

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH